

Jeisys
Better You



INTRAcel PRO™

Evolución del 1^{er} Equipo de Micro-Agujas del Mundo

INTRAcEi PRO

“El Origen de la Tecnología
RF Microaguja Fraccional”



■ Puntas SRR, FRM & SRT™


Resultados mucho más notorios, seguros y duraderos con el tratamiento combinado de puntas SRR, FRM y SRT.

Punta **SRR** Tip
49 agujas no-invasivas



Tipo redondo

Punta **FRM** Tip
49 agujas aisladas

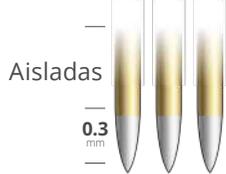

Punta **SRT™** Tip
16 agujas no-aisladas



BIPOLAR




Rejuvenecimiento de las
arrugas periorbitales

MONO/BIPOLAR

Arrugas / Poros / Acné
Arrugas finas / Cicatrices

BIPOLAR

Enrojecimiento / Pecas
Melasma

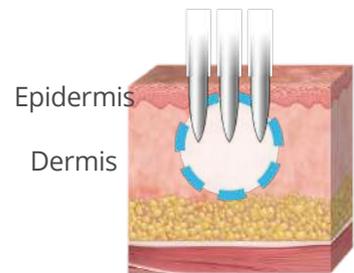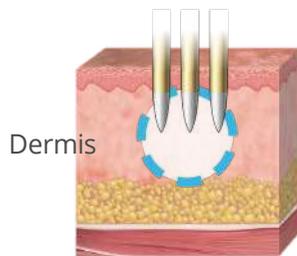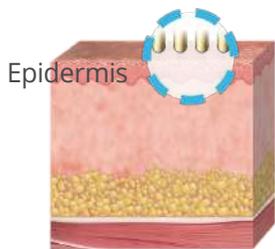


▪ **Beneficios de INTRAcel PRO™ Tratamiento de Melasma**



▪ **Tecnología MSR en tiempo real (Midiendo la Resistencia de la Piel)**


Para calentar el área dérmica, se irradia energía óptima que va midiendo la resistencia de la piel en tiempo real.

1

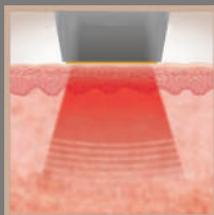


Irradiación de energía RF

2

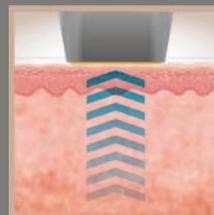

Monitoreo de resistencia de la piel y retroalimentación instantánea.


3

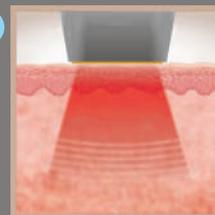

Entrega de energía óptima

Todas las áreas de la piel tienen diferente resistencia a energía eléctrica.


▪ **Antes y Después**

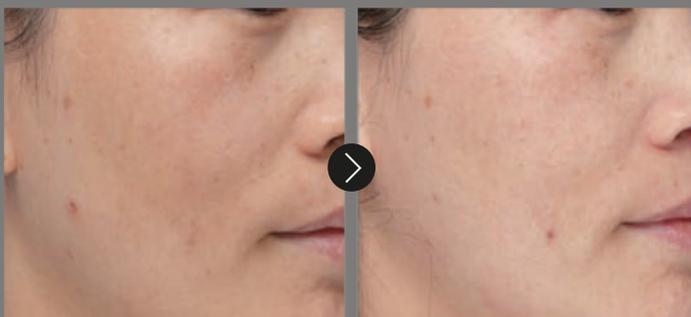


[Melasma]




[Enrojecimiento]

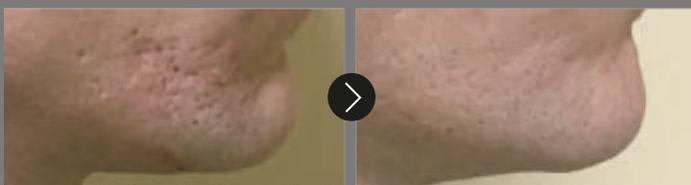


[Cicatrices tipo pica-hielo]

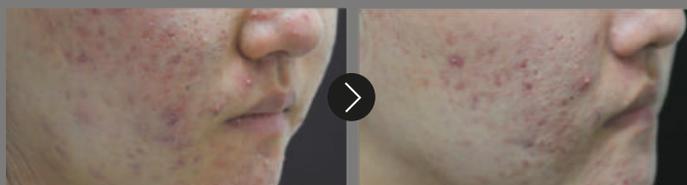

[Acné y Cicatrices de Acné]

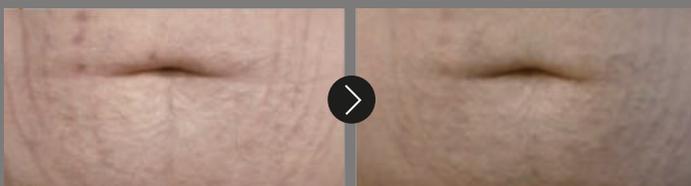

[Estrías por distensión]

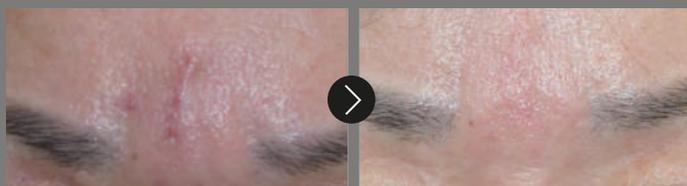

[Cicatrices]

INTRAcEel PRO™

Especificación Técnica

Tipo de RF	Bipolar / Monopolar
Potencia	Max 50 W
Frecuencia	1 Mhz
Tasa de repetición	0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / Single
Pieza de mano	Solenoide
Puntas	Invasiva 49 Micro-Aguja de punta aislada 16 Micro-Aguja de punta no aislada
	No Invasiva Punta RF de Resurfacing Superficial
Grosor de punta	0.025 cm
Área de tratamiento	1 X 1 cm
Profundidad Ajustable	0.05 / 0.08 / 0.15 / 0.2 cm
Duración de Tratamiento	10 ms - 5.0 sec

Especificación de Sistema

Peso	64 Kg
Grosor de punta	41 cm x (G) 35 cm (L) x 168 cm (A)

Testimonio

“La necesidad de asegurar una baja incidencia de PIH es especialmente importante ciertos pacientes, sobretodo aquellos con tipos de piel más oscuras o asiáticos, quienes son más propensos al PIH. Tener esa capacidad es una gran ventaja, debido a que disminuye limitaciones en terapias tópicas. Esos son los tipos de combinaciones creativas que he visto en Asia, de donde proviene esta tecnología, y aunque hay más por explorar, esta capacidad promete mucho.”

Michael H. Gold, M.D., USA

Jeisys
Better You

