

2 e n U n o

Depilación

Rejuvenecimiento



HR
+SR

*SmoothCool*TM
HYBRID

Avanzado sistema de depilación y
rejuvenecimiento facial.




Jeisys

medeostore
Tecnología que Sirve

Distribuidor exclusivo
medestore.mx
ventas@medestore.mx
Tel: 449 4782400

HR


El mejor sistema de depilación

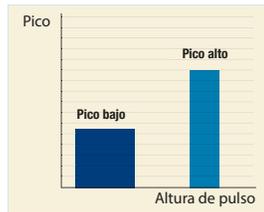

Depilación de larga duración para vello claro y delgado


- Ideal para remover el bello del área del bigote, la cual puede ser la parte mas difícil en tema de depilación.

Gran poder Smooth Cool

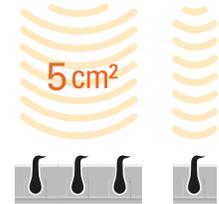


SmoothCool™ HYBRID

SR

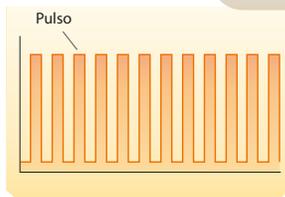


Máximo 200 pulsos de energía constante en μS (microsegundos)

Duración del pulso Cell-toning

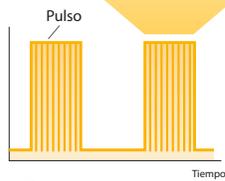

Pulso Cell-toning

Pulso en (μS)microsegundos

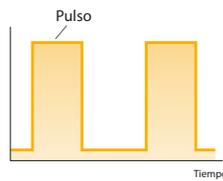

Pulso normal


Pulso en (ms) milisegundos

Tecnología Cell-toning

Tecnología Cell-toning usa pulsos de duración en μS (microsegundos) para tratar las lesiones pigmentarias de forma segura, tales como el melasma y PIH. La repetición de las micro luces del pulso cell-toning tienen como objetivo la melanina mas que otras partes de su alrededor, incrementa la temperatura de la melanina y destruye la misma. Para tratar las lesiones pigmentarias tales como el melasma, Cell-toning provee rapidez, seguridad y mayor efectividad.

Filtro especializado dual

- 8 intercambiables cut-off y filtros dobles para tratamientos personalizados de lesiones y distintos tipos de piel.
- Filtrado doble de 420(S)nm (420~600nm), 530(S)nm (530~600nm) maximiza el tratamiento de acné y vascular mientras minimiza los efectos adversos ya que la tasa de absorción de oxihemoglobina es alta pero la tasa de absorción de melanina es baja.
- Estos filtros dobles solamente pasan a través de especificas longitudes de onda y otras longitudes de onda cut-off.

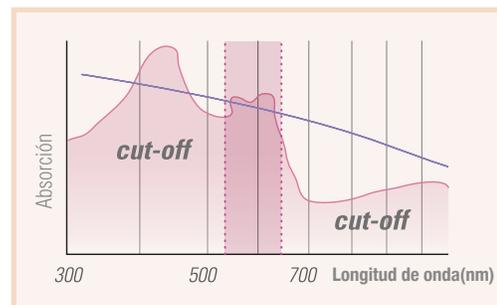

420(s)nm

530(s)nm

530nm


560nm

590nm


640nm

700nm


800nm

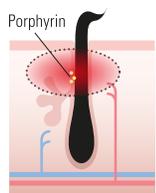


Acné

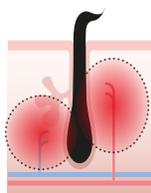

Vascular

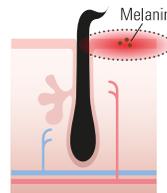

Pigmento

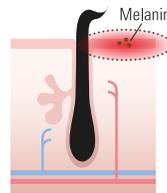

Depilación