

Jeisys
Better. You.

Aesthetics
Awards

Highly Commended Treatment


ULTRAcel™

La Plataforma para el Tratamiento Integral de la Piel

Cofepris  Registro Sanitario No. 2739E2018 SSA



¡Terapia que penetra en todas las capas!

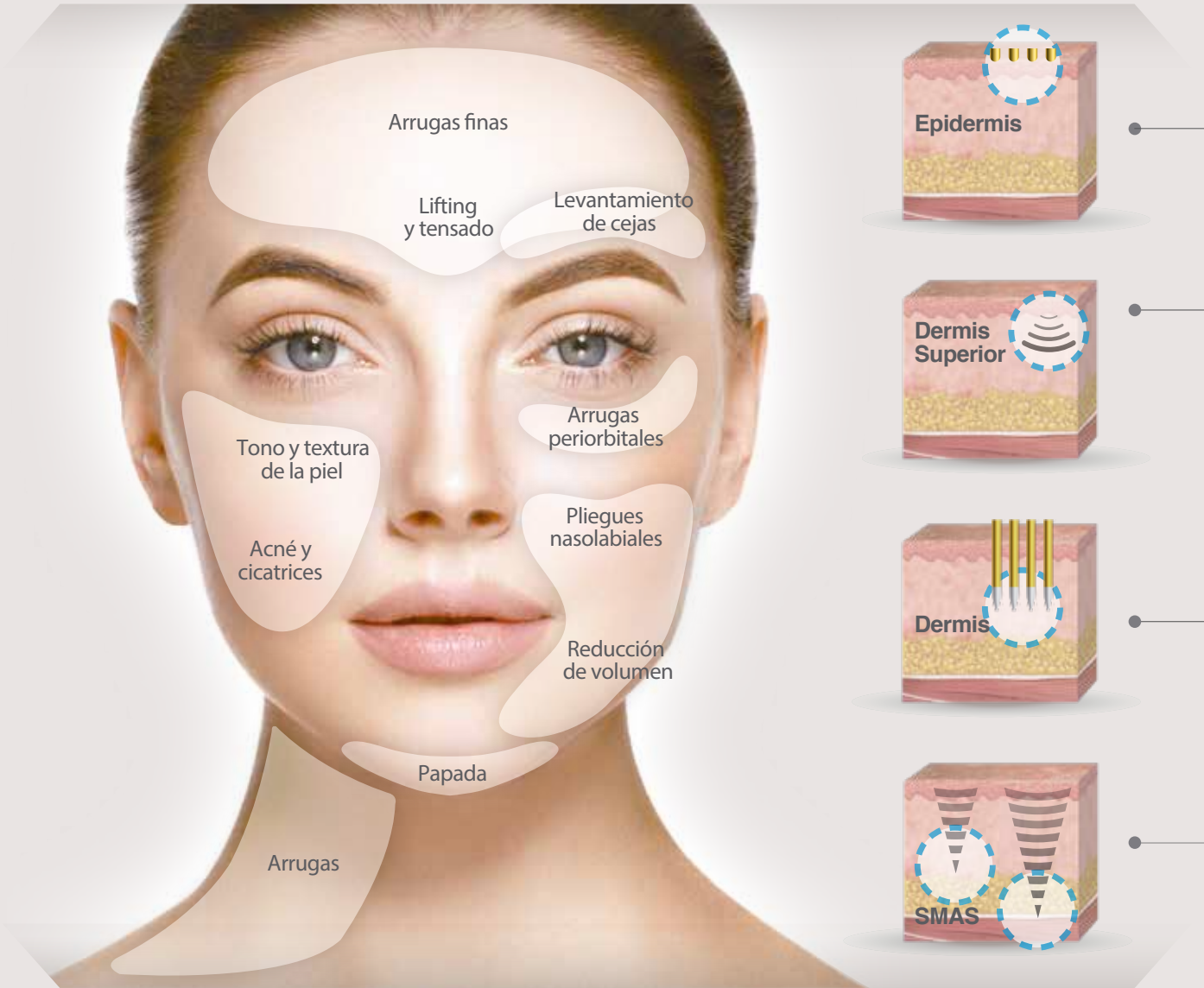

ULTRAcel™

01


Epidermis

Superficial RF Rejuvenation

Rejuvenecimiento Superficial con RF



Punta SRR
49 agujas no
invasivas

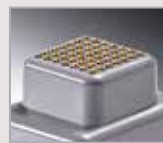

Arrugas finas,
Tono y textura de la piel.

02

Dermis Superior

Grid Fractional Radiofrequency

Radiofrecuencia Fraccionada en Cuadrícula



Punta GFR

De 7x7mm

De 15x15mm



Pliegues nasolabiales,
Tensado, Acné,
Arrugas periorbitales.

03

Dermis

Fractional Radiofrequency Microneedling

Radiofrecuencia Fraccionada Con Micro-agujas



Punta FRM

49 agujas
aisladas

Punta SRT™

16 agujas
no aisladas



(Opcional)

Acné, cicatrices de acné,
estrías, poros, rejuvenecimiento
de piel y escote.

04

SMAS

High Intensity Focused Ultrasound

Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad



Cartuchos HIFU

1.5 UQ

2.0 UQS




3.0 UQ

4.5 UQ



Reducción de volumen,
arrugas, lifting, tensado, papada.

Todo en uno para un tratamiento combinado.

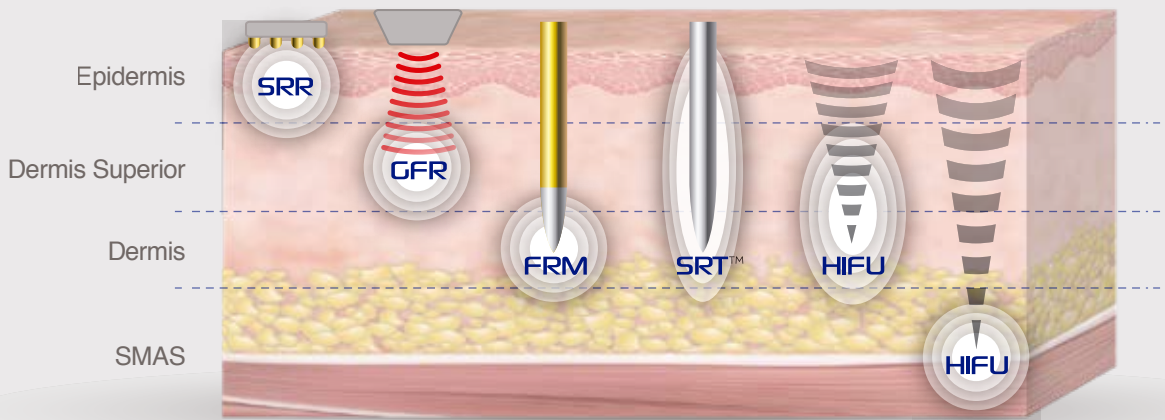

• MSR en tiempo real (**M**asuring **S**kin **R**esistance)

Medición de impedancia en tiempo real




Irradiación de energía RF

Medición de impedancia y retroalimentación instantánea

Entrega óptima de energía

• SRT (**S**elective **R**F **T**hermolysis) por agujas no aisladas.

Termólisis selectiva de RF

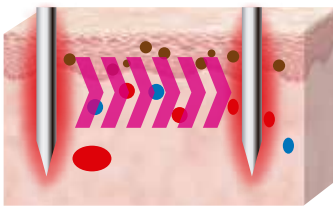

Coagulación selectiva alrededor de los vasos entre las agujas debido a la conductividad diferente de cada tejido.



Efecto antiangiogénico, inhibe el crecimiento de melanina

Mejora de melasma y enrojecimiento de la piel.

• HIFU **U**LT**R**A rápido y delgado



Velocidad incomparable

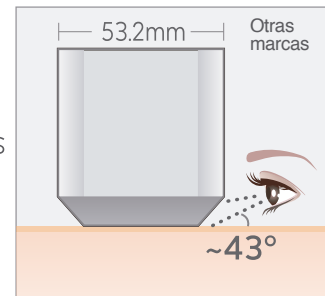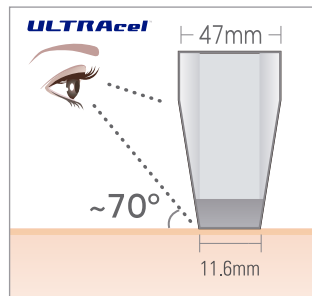

VS

Mejor visibilidad


Combinación de tratamientos



[HIFU + FRM +GFR]




[HIFU + FRM +GFR]

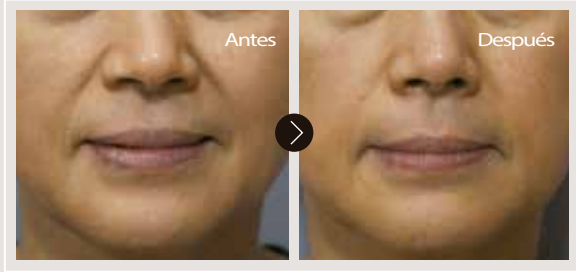


[HIFU + GFR]



[HIFU + FRM]

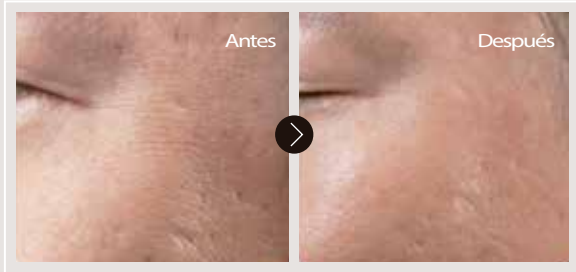


[FRM + SRR]

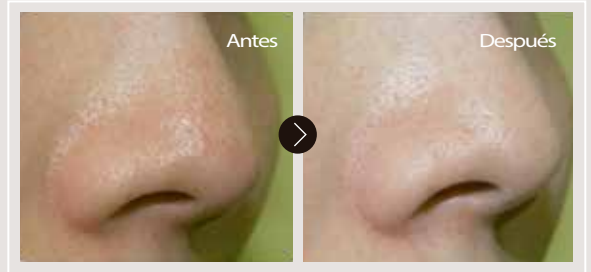


[FRM + SRR]



Un solo tratamiento

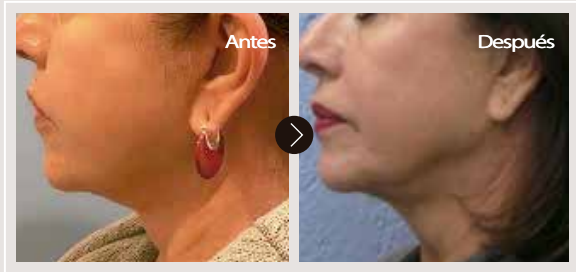


[HIFU]

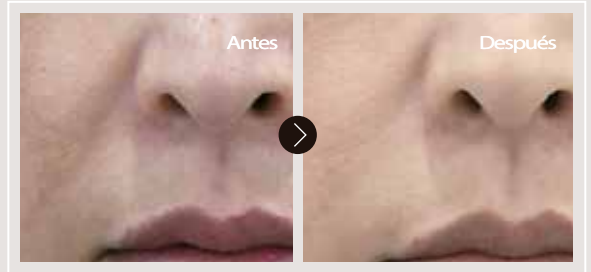

[HIFU]



[FRM]

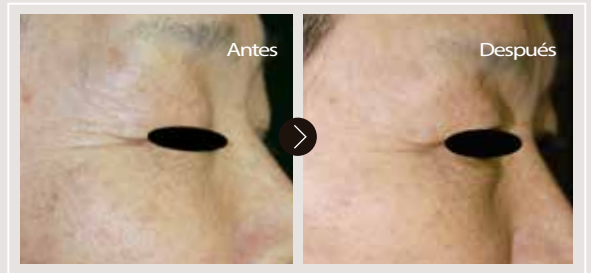

[GFR]

ULTRAcel™

Especificaciones Técnicas

FRM	Energía Aplicada	6Mhz RF
	Tipo de RF	Bipolar, Monopolar
	Energía Máxima de Salida	40.5 Watt
	Control de Profundidad	0.5mm, 0.8mm, 1.5mm, 2.0mm
	Tipo de Aguja	Punta FRM, SRR Y SRT™
GFR	Energía Aplicada	6Mhz RF
	Tipo de RF	Monopolar
	Energía Máxima de Salida	136 Watt
	Tipo de Punta	15 x 15 mm, 7x7mm
HIFU	Frecuencia	7MHz
	Energía Máxima de Salida	3J/cm ²
	Cartucho	UQ1.5, UQ2.0, UQ3.0, UQ4.5
	Espaciado	1 ~ 2mm(0.1mm/step)
	Longitud	5 ~ 25mm(5mm/step)

Especificaciones del Sistema

Peso	40.5 Kg
Dimensiones	98.28cm (Al) X 35.7cm (An) 40.83cm (L)

