



1 Mejilla

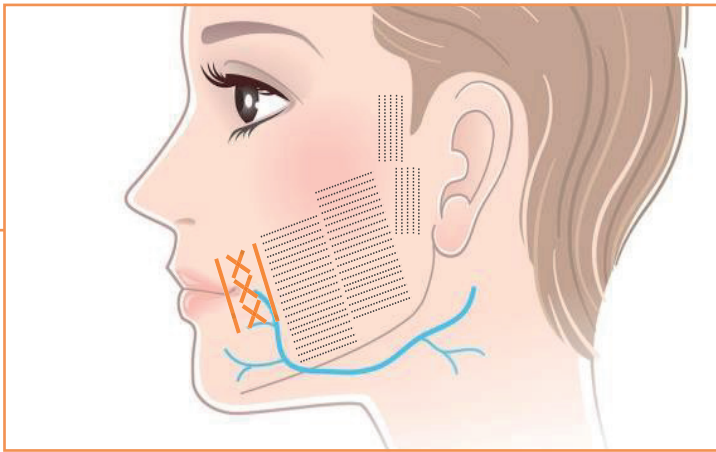

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	Q 4.5	0.5 ~ 0.9	1.2 ~ 1.5	50 ~ 70
2do	Q 3.0	0.5 ~ 0.9	1.2 ~ 1.5	50 ~ 70


2 Cuello y Papada

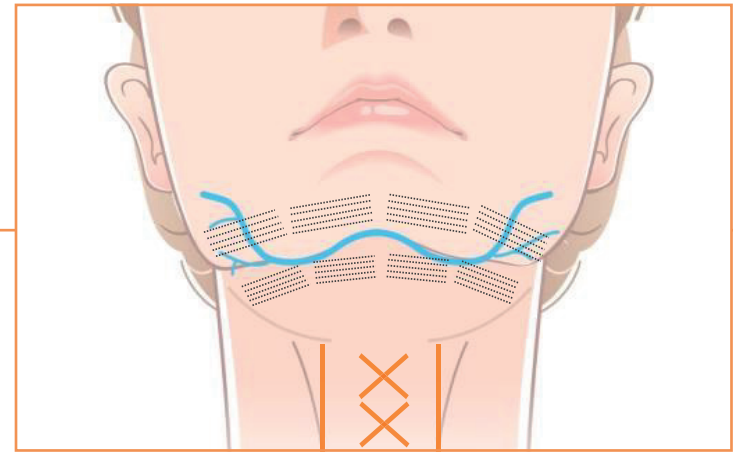

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	Q 4.5	0.5 ~ 0.8	1.2 ~ 1.5	50 ~ 70
2do	Q 3.0	0.4 ~ 0.7	1.2 ~ 1.5	50 ~ 70

3 Periorbital y Cejas

- **No realizar el tratamiento en el área de 2 cm debajo de los ojos.**
- Tire suavemente de la piel de los párpados hacia abajo para alejarla del ojo lo más posible.

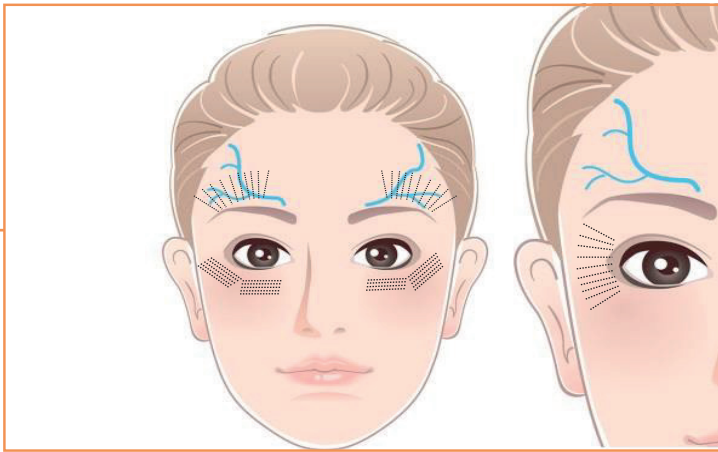


Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	Q 3.0	0.3 ~ 0.6	1.2 ~ 1.5	10 ~ 15
2do	QS 2.0	0.1 ~ 0.2	1.2 ~ 1.5	10 ~ 15

- **No realizar el tratamiento en el área de 1cm sobre la línea mandibular.**
- **No realizar el tratamiento en el área de tiroides.**


- Cuando se trate un área estrecha o que requieren muchas líneas, el tratamiento puede dividirse en dos pases.
- Procedimientos directamente sobre la línea mandibular o sobre los nervios faciales, pueden causar efectos secundarios o incomodidad en el paciente.

4 Frente

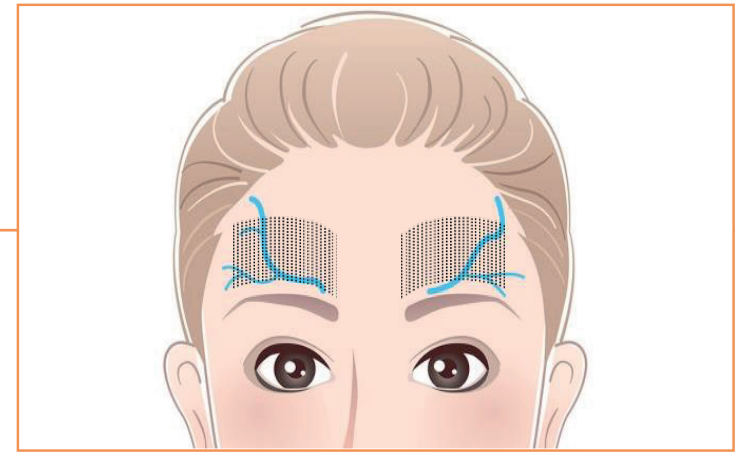

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	Q 3.0	0.3 ~ 0.6	1.2 ~ 1.5	20 ~ 30
2do	Q 1.5	0.1 ~ 0.2	1.2 ~ 1.5	20 ~ 30


5 Surco Nasogeniano

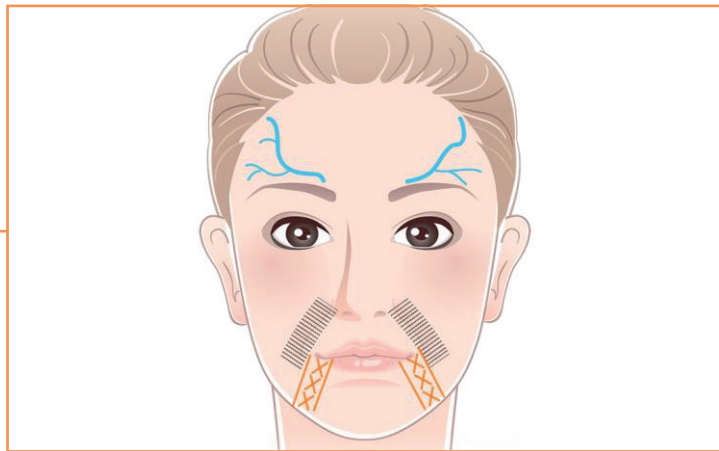

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	4.5	0.5 ~ 0.9	1.2 ~ 1.5	30 ~ 50
2do	3.0	0.5 ~ 0.9	1.2 ~ 1.5	30 ~ 50

- No realizar el tratamiento en el área de 1cm sobre la línea mandibular.


6 Escote

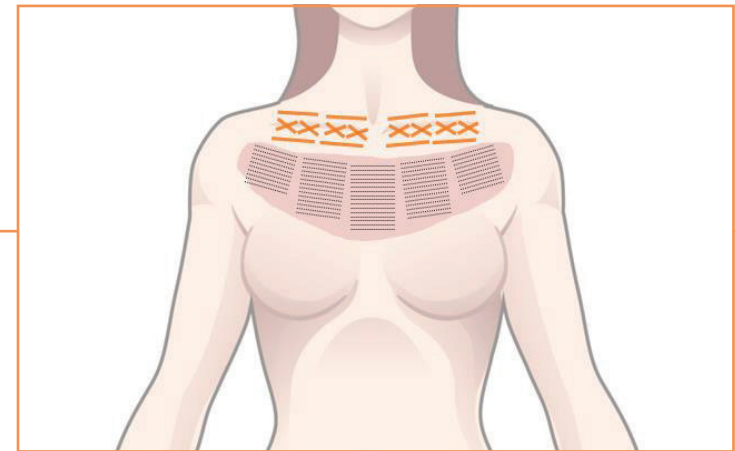

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	3.0	0.4 ~ 0.8	1.2 ~ 1.5	100 ~ 150
2do	1.5	0.4 ~ 0.8	1.2 ~ 1.5	100 ~ 150

- Tratar con el Cartucho de 3.0mm con un pase e inmediatamente después dar un pase con el Cartucho de 1.5mm.


7 Parte superior del brazo

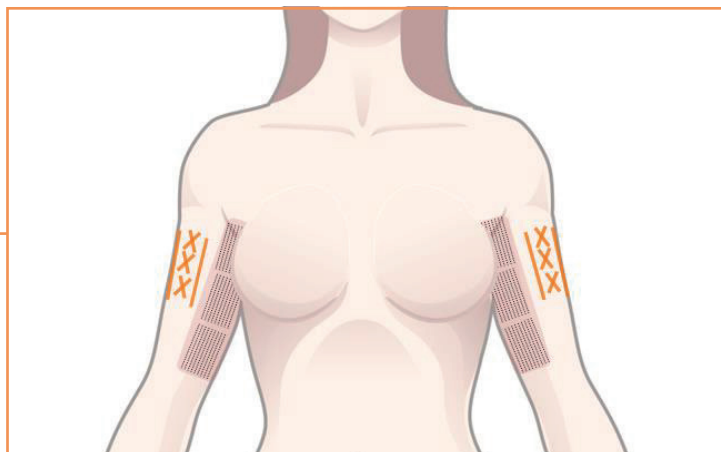

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	9.0	1.2 ~ 1.5	1.2 ~ 1.5	200 ~ 250
2do	6.0	1.2 ~ 1.5	1.2 ~ 1.5	200 ~ 250

- Tratar con el Cartucho de 9.0mm con un pase e inmediatamente después dar un pase con el Cartucho de 6.0mm.


8 Axilar

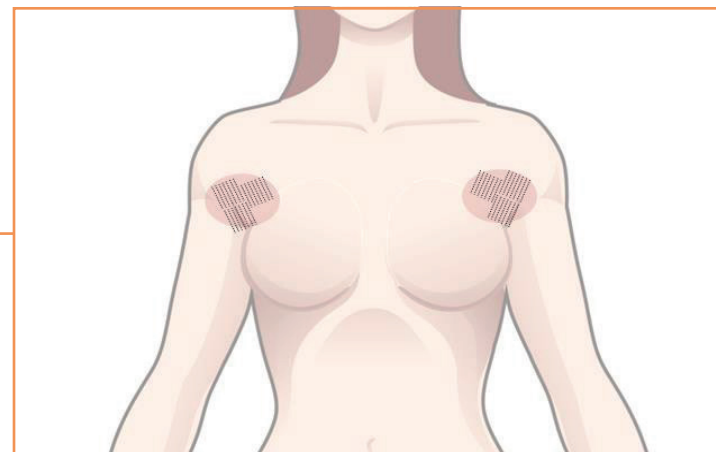

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1 - 2	6.0	1.2 ~ 1.5	1.2 ~ 1.5	50 ~ 100


- No realizar el tratamiento directamente sobre el tejido o implante mamario.
- No realizar el tratamiento si el paciente siente hormigueo, moverse a otra área.

9 Abdomen

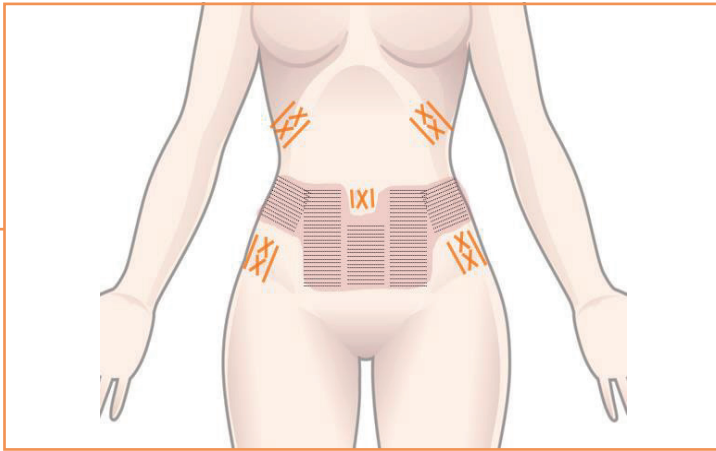


Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	13.0	1.2 ~ 1.8 J	1.2 ~ 1.5	500 ~ 700
2do	11.0	1.2 ~ 1.8 J	1.2 ~ 1.5	500 ~ 700
3ro	9.0	1.5 J	1.2 ~ 1.5	500 ~ 700

10 Cintura

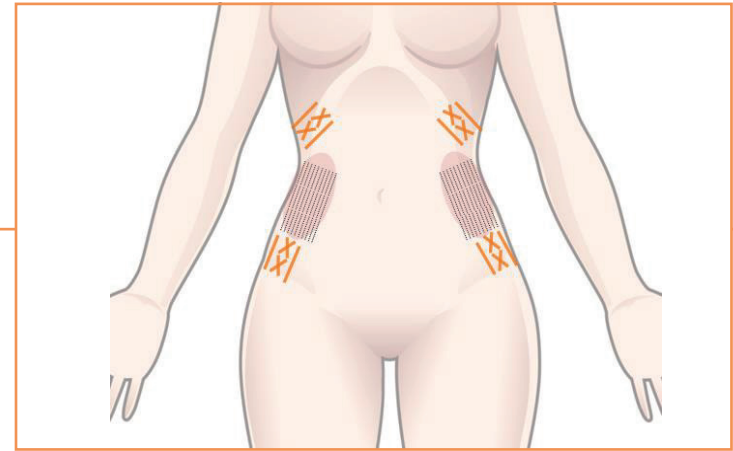

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	4.5	1.2 ~ 1.5 J	1.2 ~ 1.5	300 ~ 500
2do	3.0	1.2 ~ 1.5 J	1.2 ~ 1.5	300 ~ 500
3ro	3.0	1.2 J	1.2 ~ 1.5	300 ~ 500

11 Caderas

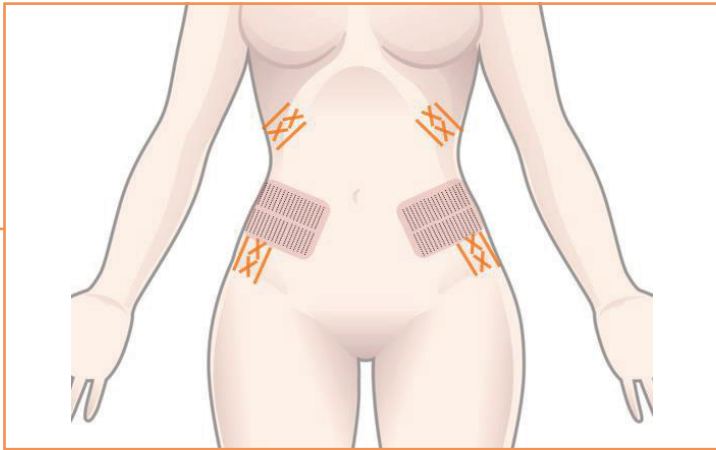

Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	13.0	1.2 ~ 1.5 J	1.2 ~ 1.5	250 ~ 400
2do	11.0	1.2 ~ 1.5 J	1.2 ~ 1.5	250 ~ 400
3ro	9.0	1.2 J	1.2 ~ 1.5	250 ~ 400

- Cuando se trate alrededor de la pelvis, los pacientes podrían sentir un ligero hormigueo.
- No tratar alrededor del área del ombligo.

- Elegir cartucho y número de pases de acuerdo a la condición de la piel del paciente.
- Tratar con el Cartucho de 13.0 (11.0)mm con un pase e inmediatamente después, tratar con el Cartucho de 11.0 (9.0)mm.

12 Muslos



Pases	Cartucho	Energía (J)	Espaciado	Líneas de tratamiento
1ro	13.0	1.2 ~ 1.8 J	1.2 ~ 1.5	500 ~ 700
2do	11.0	1.2 ~ 1.8 J	1.2 ~ 1.5	500 ~ 700
3ro	9.0	1.5 J	1.2 ~ 1.5	300 ~ 700

- No realizar el tratamiento alrededor de la fosa poplítea, como hay un nervio tibial, el paciente puede sentir hormigueo o piquetes.