

**Tecnología Innovadora**  
Para tratamientos de medicina estética

# Noble ) HAPE

Sistema de modelado corporal no invasivo


Delinea tu figura y tu vida




# Sinergia de avanzadas tecnologías para un efecto moldeador con NobleSHAPE

¡Solución para la grasa y la celulitis!


Eunsung es el mejor compañero de un estilo de vida saludable ya que da solución a diversos problemas de obesidad.

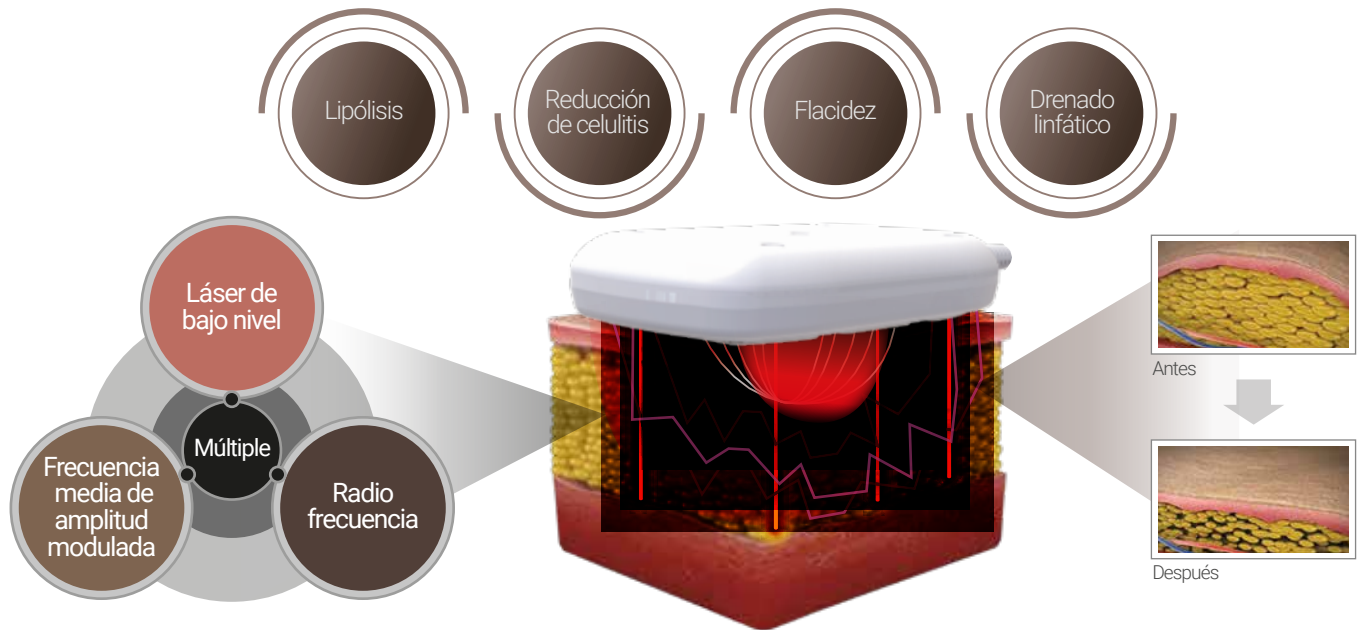

## Láser de bajo nivel

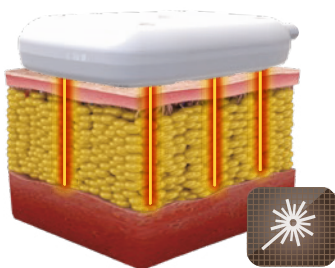

Adipocito saludable

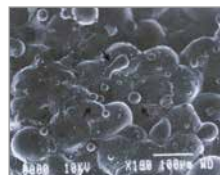


Las membranas celulares del adipocito crean una salida transitoria, permitiendo la filtración del triglicérido.



Los adipocitos emulsionados son completamente interrumpidos (reducción de grasa).

※ Licuefacción de grasa: efecto del láser de bajo nivel en tejido adiposo.

## Frecuencia Media de Amplitud Modulada

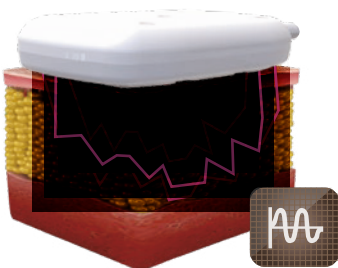

- Curso 1 Celulitis\_30 min**
- Elasticidad de tejido conectivo
  - Regeneración de tejido de la piel
  - Circulación sanguínea y linfática

- Curso 2 Lipólisis\_30 min**
- Descomposición de grasa
  - Circulación sanguínea y linfática
  - Vasodilatación

- Curso 3 Modelado corporal\_30 min**
- Fortalecimiento muscular del tejido conectivo
  - Tensión y relajación muscular

- Curso 4 Revitalización\_30 min**
- Activación muscular
  - Promover el metabolismo

- Curso 5 Relajación\_30 min**
- Circulación sanguínea y linfática
  - Promover el metabolismo

- Curso 6 Drenado linfático\_20 min**
- Circulación sanguínea y linfática
  - Relajación vascular

## Radio Frecuencia



El tratamiento con RF es caracterizado principalmente por calentar el tejido profundo a 42~45°C. El calentamiento profundo continuo da como resultado la reducción de células adiposas y una mejora en el modelado corporal.

# Por qué NobleSHAPE

Existen diversos tipos de obesidad. Distintos patrones de desarrollo de obesidad dependen de la dieta de cada individuo, de su complejión y de factores genéticos. Un cuerpo ideal no se puede obtener por medio de una dieta simple para pérdida de peso.

Particularmente, para la celulitis resultante del tejido irregular y demasiado formado en la piel, un simple plan de reducción en la ingesta calórica no funciona. Es por eso que NobleSHAPE está desarrollado para abordar estas afecciones causadas por los múltiples tipos de obesidad.

## Ventajas

4 canales en 8 almohadillas



Tratamiento rápido en un lapso de 30 min.



Tratamiento no invasivo



Apagado automático a temperaturas irregulares



Reducción de células grasas / Reducción de talla



Sin tiempo de inactividad



## Eficacia comprobada

### Abdomen / 4 Sesiones



Antes



Después

- Progreso de una Mujer de 40 años.
- Escaneo de ultrasonido después de tratamiento LLL, AMF, RF.

### Abdomen / 6 sesiones




Antes



Después

- Progreso de un Hombre de 30 años.
- Escaneo de ultrasonido después de tratamiento LLL, AMF, RF.

## • Áreas de aplicación

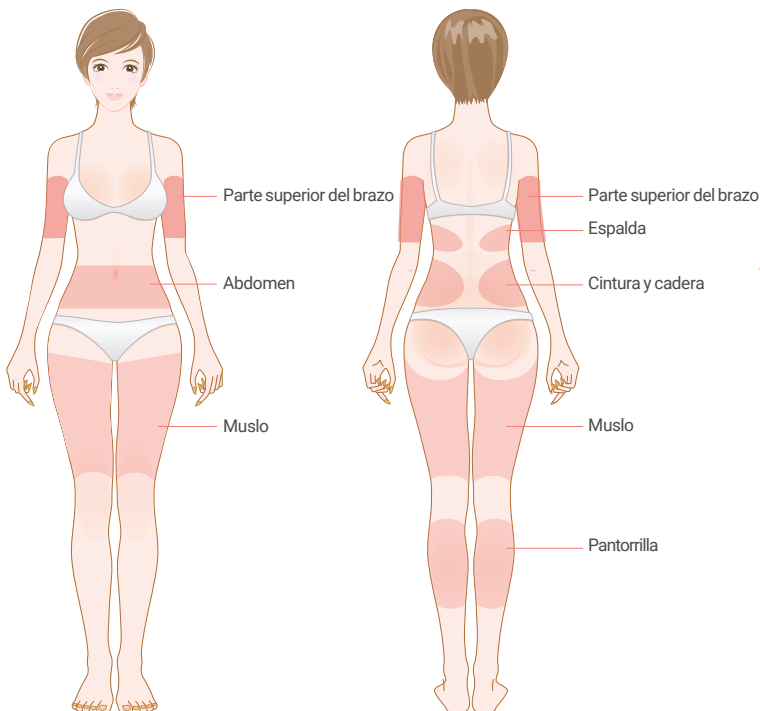


## • Estructura de la almohadilla

Pieza de mano con tres funciones para un manejo completo.



## • Guía de usuario

Mientras se usa una almohadilla.

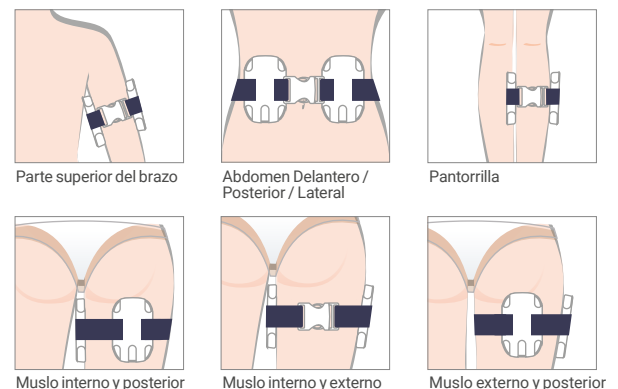



### Especificaciones

Tipo de energía	Láser de bajo nivel: 658nm (40mW) Frecuencia Media de Amplitud Modulada: 1~4,000Hz Radio Frecuencia: 1MHz
Almohadilla	Grande (x4ea) (95x163.1x23.7) Mediana (x4ea) (75x133.1x23.7)
Energía de entrada	Voltaje: 100~240V / Consumo de energía: 300VA
Dimensión (mm)	Cuerpo: 394.6(Am)x 482.1(P)x264.3(A)

