

PROTOCOLO CELLMULA™

PARA CUIDADO DE LA PIEL SOLUCIÓN HSR

APLICACIONES Y CANDIDATOS

- ▶ Piel envejecida.
- ▶ Arrugas finas.
- ▶ Acné activo.
- ▶ Cicatrices causadas por acné.
- ▶ Poro abierto.

SESIONES Y PERIODICIDAD

- ▶ Se recomiendan al menos 4 sesiones.
- ▶ Realice una sesión cada semana.

PROTOCOLO

1. Aplique anestésico tópico sobre toda la piel.
 2. Después de 30 minutos, retire el anestésico de la piel.
 3. Limpie la zona a tratar (cara).
 4. Aplique la solución HSR en toda la piel.
 5. Realice el protocolo de EPN como se menciona en el manual.
- ▶ Tenga en cuenta que la profundidad de la aguja debe de ser de 0.5, al ser más profundo, el sangrado podría evitar que el producto penetre en la piel. El nivel de electroporación se recomienda en 1.
 - ▶ Tenga en cuenta que la solución HSR tiene componentes que proporcionan una barrera humectante, por lo que NO ES NECESARIO volver a aplicar al terminar el tratamiento. De hacerlo, podría quedar producto en la piel sin absorber, creando una capa blanca en la piel.


❖ Rejuvenecimiento, Aclaramiento y Cierre de poros.

Técnica	Profundidad	Nivel de Electroporación	Pasadas
Estampado o Espiral	0.5 mm	1-2	2-3 pasadas
EP + Espiral	0.2-0.5 mm	1-2	2-3 pasadas

1. Estampado



2. Espiral

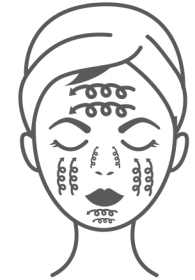

❖ Acné

Técnica	Profundidad	Nivel de EP	Pasadas
Cara completa o Sólo en cicatrices	0.7-1.5 mm	1-2	2-3 pasadas
EP + Espiral	0.5 mm	1-2	2-3 pasadas

EP= Electroporación

1. Estampado



2. Espiral



DOSIS RECOMENDADA

Una ampolla de 5ml por sesión.

CELLMULA HSR

PRECAUCIÓN:

El presionar durante los movimientos circulares puede causar heridas. No presione.