




**PRECAUCIÓN**

Usar niveles de energía altos con poca penetración puede causar daño en la epidermis y posibles pigmentaciones.

Para niveles superiores al 4 es necesario una penetración de al menos 1.5mm.

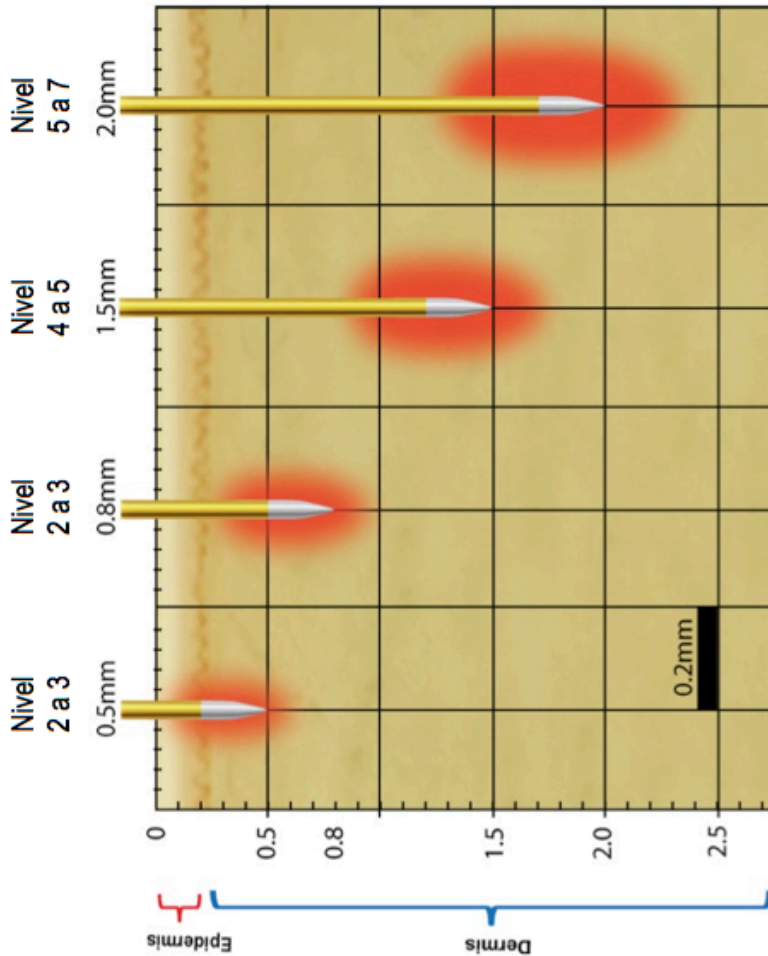

## Notas sobre esta guía

- Tenga en cuenta que los parámetros aquí presentados han sido dados para obtener óptimos resultados.
- Los parámetros pueden ser modificados por las condiciones particulares de cada paciente.
- Si va a modificar los parámetros, tenga en cuenta primero la seguridad de su paciente.
- Estos protocolos pueden llegar a modificarse si se logran mejores resultados de alguna otra forma.
- Recuerde siempre solicitar el consentimiento informado a su paciente antes de cualquier tratamiento.

## Recomendaciones generales durante el tratamiento

- Utilice una punta nueva por cada paciente y tirela después del tratamiento aún y que queden disparos.
- Utilice guantes.
- Utilice antiséptico durante el tratamiento para facilitar la penetración de las agujas, rociando la zona a tratar (Sólo FRM).
- Puede ajustar penetración y energía dependiendo la zona que vaya a tratar para mejorar la sensación de su paciente.
- **Asegúrese de conectar la placa neutra al paciente cuando vaya a realizar el tratamiento monopolar. Si el tratamiento completo incluye modo Monopolar y Bipolar, puede conectar la placa desde el inicio ya que no afecta el funcionamiento del modo Bipolar.**

## Guía de tratamientos FRM + SRR

FRM Monopolar y SRR Monopolar requieren que conecte la placa neutra al paciente.

Lifting facial					
Paso	Punta / Modo	Piel normal		Piel delgada	
		Profundidad	Nivel	Profundidad	Nivel
Paso 1 Cara y cuello	FRM Bipolar	0.8	3	0.5 a 0.8	3
Paso 2 Cara y cuello	FRM Monopolar	1.5 a 2.0	5	0.8 a 1.5	4
Paso 3 Periocular	SRR Bipolar	NA	3	NA	3
Paso 4 Área de mayor flacidez	FRM Monopolar	1.5 a 2.0	6 a 7	1.5	5

Flacidez facial					
Paso	Punta / Modo	Piel normal		Piel delgada	
		Profundidad	Nivel	Profundidad	Nivel
Paso 1 Cara y cuello	FRM Monopolar	0.8	3	0.5	2
Paso 2 Cara y cuello	FRM Monopolar	1.5	5	0.8	4
Paso 3 Área de mayor flacidez	FRM Monopolar	1.5	7	1.5	6
Paso 4 Periocular	SRR Bipolar	NA	3	NA	3

Tratamiento de poros					
Paso	Punta / Modo	Piel normal		Piel delgada	
		Profundidad	Nivel	Profundidad	Nivel
Paso 1 Cara y cuello	FRM Bipolar	0.8	3	0.5	1
Paso 2 Sobre poros	FRM Monopolar	1.5	4	0.8	2

Tratamiento de acné					
Paso	Punta / Modo	Piel normal		Piel delgada	
		Profundidad	Nivel	Profundidad	Nivel
Paso 1 Cara y cuello	FRM Bipolar	0.8	2 a 3	0.8	2
Paso 2 Sobre lesiones	FRM Monopolar	1.5	6 a 7	0.8	4

- Del paso 2, realice de 2 a 4 repeticiones dependiendo de la condición del paciente.
- Sobreponga un 50% entre un disparo y otro.
- El tratamiento puede o no repetirse dependiendo de las condiciones del acné en el paciente. Generalmente una sesión es suficiente.

Tratamiento para cicatrices de acné					
Paso	Punta / Modo	Piel normal		Piel delgada	
		Profundidad	Nivel	Profundidad	Nivel
<b>Lesiones normales</b>					
Paso 1 Cara y cuello	FRM Bipolar	0.8	2	0.8	2
Paso 2 Cara y cuello	FRM Bipolar	1.5	3	0.8	3
<b>Lesiones severas</b>					
Paso 1 Cara y cuello	FRM Bipolar	0.8 a 1.5	3	0.8	3
Paso 2 Cara y cuello	FRM Bipolar	1.5 a 2.0	4	1.5	4

- Del paso 2, realice de 2 a 4 repeticiones dependiendo de la condición del paciente.
- Sobreponga un 50% entre un disparo y otro.
- Generalmente son necesarias entre 2 y 3 sesiones para mejorar las condiciones de las cicatrices de acné.


Tratamiento de estrías					
Paso	Punta / Modo	Piel normal		Piel delgada	
		Profundidad	Nivel	Profundidad	Nivel
Sobre las estrías	FRM Bipolar	1.5 a 2.0	5 a 7	3 a 4	30%

Ya que las estrías son comúnmente tratadas en abdomen, espalda o muslos, es necesario que al realizar el tratamiento haga máxima presión en cada disparo.

**Guía de tratamientos para Lesiones Pigmentarias**  
**Utilice puntas FRM 16 agujas no aisladas**

**Parámetros generales recomendados**

- Nivel del 2 al 3.
- Cada disparo deberá hacerse con 50% de sobre posición (*overlap*).
- Pueden realizarse de uno hasta dos pases para optimizar el resultado. No realice más de dos pases.
- La longitud de la aguja deberá determinarla el médico en base a la condición de la piel del paciente.
- Utilice anestesia tópica donde se indique.
- Use la guía mostrada para determinar la profundidad a utilizar según la zona; tenga en cuenta que estos valores pueden ser ajustados a discreción del médico.

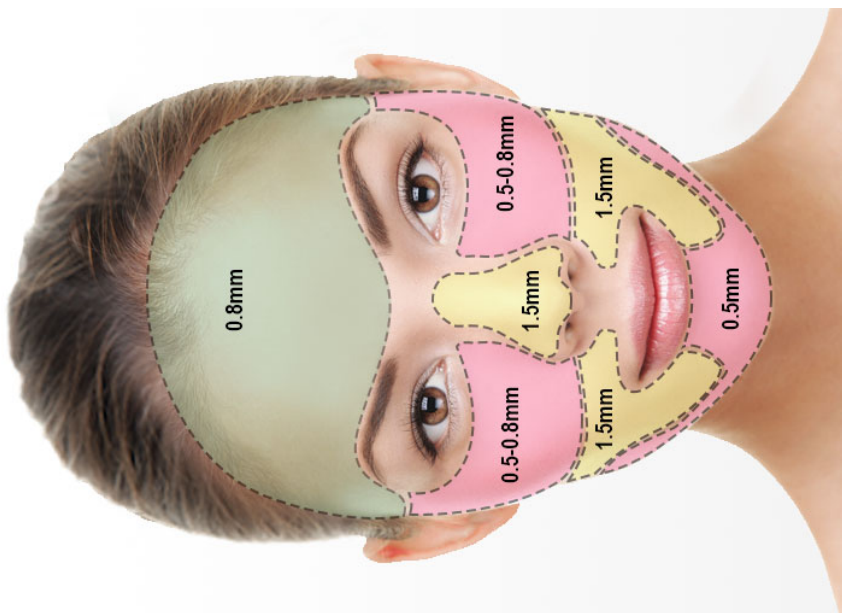

Por desórdenes relacionados con la melanina				
Protocolo 1 – Alternando tratamientos, Una semana entre sesiones				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento 1	Anestesia →	INTRAcél Tip 16 agujas (1 pasada) →	AD / SB	Intervalo 1 semana entre sesiones
Tratamiento		Paso 1	Paso 2	Sesiones De 5 a 6 de cada tratamiento
Tratamiento 2		TRI-BEAM Laser Toning →	RP / PR	
Protocolo 2 – Combinando tratamientos, Dos semanas entre sesiones				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento único	Anestesia + INTRAcél Tip 16 agujas (1 pasada) →	TRI-BEAM Laser Toning →	AD / SB o RP / PR	Intervalo 2 semanas entre sesiones  Sesiones 10
Hiperpigmentación (PIH)				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento único	Anestesia + INTRAcél Tip 16 agujas (1 pasada) →	AD / SB o RP / PR		Intervalo 1 semanas entre sesiones  Sesiones 3
Región orbital (Incluyendo desórdenes relacionados con la melanina)				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento único	Anestesia + INTRAcél Tip 16 agujas (1 pasada) →	Celtec V Cell Toning →	AD / SB o RP / PR	Intervalo 2 semanas entre sesiones  Sesiones 4
Cuidado de la piel				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento único	Anestesia →	INTRAcél Tip 16 agujas (1 a 2 pasadas) →	AD / SB o RP / PR	Intervalo 2 semanas entre sesiones  Sesiones 10

\* Los tiempos entre sesiones y número de sesiones pueden cambiar a consideración del médico.

Eritema facial y/o Desordenes vasculares				
Protocolo 1 – Alternando tratamientos, Una semana entre sesiones				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento 1	Anestesia →	<b>INTRAcél</b> Tip 16 agujas (1 pasada) →	AD / SB	<b>Intervalo</b> 1 semana entre sesiones
Tratamiento 2		<b>Celtec V</b> Cell Toning →	RP / PR	<b>Sesiones</b> De 5 a 6 de cada tratamiento
Protocolo 2 – Combinando tratamientos, Dos semanas entre sesiones				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento único	Anestesia + <b>INTRAcél</b> Tip 16 agujas (1 pasada) →	<b>Celtec V</b> Cell Toning →	AD / SB o RP / PR	<b>Intervalo</b> 2 semanas entre sesiones  <b>Sesiones</b> 10
Protocolo 3 – 5 sesiones INTRAcél y posteriormente 5 sesiones Celtec V				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento 1	Anestesia →	<b>INTRAcél</b> Tip 16 agujas (1 pasada) →	AD / SB o RP / PR	<b>Intervalo</b> 1 semana entre sesiones
<b>Realice primero las 5 sesiones de INTRAcél y posteriormente las 5 sesiones de Celtec V – NO ALTERNE LOS TRATAMIENTOS</b>				<b>Sesiones</b> 5 sesiones de cada tratamiento
Tratamiento 2		<b>Celtec V</b> Cell Toning →	RP / PR	
Tratamiento de acné				
Protocolo – 5 sesiones INTRAcél y posteriormente 5 sesiones Edge ONE				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Notas	
Tratamiento 1	Anestesia →	<b>INTRAcél</b> Tip 16 agujas (2 pasadas) →	<b>Intervalo</b> 1 semana entre sesiones de INTRAcél	
<b>Realice primero las 5 sesiones de INTRAcél y posteriormente las 5 sesiones de Edge ONE - NO ALTERNE LOS TRATAMIENTOS</b>			Hasta 1 mes entre sesiones de Edge ONE	
Tratamiento 2		<b>Edge ONE</b> CO <sub>2</sub> Fraccionado	<b>Sesiones</b> 5 sesiones de cada tratamiento	

\* Los tiempos entre sesiones y número de sesiones pueden cambiar a consideración del médico.

Mejorar el tono facial				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Notas
Tratamiento único	Anestesia →	<b>INTRAcél</b> Tip 16 agujas (1 pasada) →	AD / SB o RP / PR	<b>Intervalo</b> 1 semana entre sesiones  <b>Sesiones</b> 3
Mejorar elasticidad, efecto <i>Lifting</i>				
Protocolo – 5 sesiones INTRAcél y posteriormente 5 sesiones ULTRAcél HIFU				
Tratamiento	Paso 1	Paso 2	Notas	
Tratamiento 1	Anestesia →	<b>INTRAcél</b> Tip 16 agujas (1 pasada)	<b>Intervalo</b> 1 semana entre sesiones de INTRAcél	
<b>Realice primero las 5 sesiones de INTRAcél y posteriormente las 5 sesiones de Edge ONE - NO ALTERNE LOS TRATAMIENTOS</b>			Hasta 1 mes entre sesiones de ULTRAcél	
Tratamiento 2		<b>ULTRAcél</b> HIFU	<b>Sesiones</b> 5 sesiones de cada tratamiento	

\* Los tiempos entre sesiones y número de sesiones pueden cambiar a consideración del médico.

## Post-tratamiento

Al finalizar cada sesión realice uno de los siguientes tratamientos en su paciente.

Activador dérmico (AD) /grama de Skin Booster (SB).

- Sistema de tratamiento en casa para aclaramiento de la piel y activación celular.
- Supósito es blanqueamiento y Skin Booster.

Relajación de la piel (RP) /grama revitalizador (PR).

- Protocolo de cuidado en casa.
- Supósito es la relajación de la piel.